

♦ CATÁLOGO OFICIAL · GAMA PIONEXT

Impresoras + Resinas

Ecosistema digital dental completo:

2 impresoras PioNext + 18 resinas PioCreat certificadas CE · FDA · ISO 10993 · ISO 13485.

Distribuido en España por AldraScan.



IMPRESORA 01 · CHAIRSIDE

PioNext Mini

10 min por corona · print + cure integrado.



IMPRESORA 02 · LABORATORIO

PioNext Ultra

Batch 30+ coronas · full-arch · cartucho 1 kg.

HARDWARE

2

IMPRESORAS 3D

RESINAS

18

FORMULACIONES

COMPATIBLE

DLP/LCD

385-405 nm

CERTIFICADAS

CE · FDA

ISO 10993 · 13485

NAVEGA EL CATÁLOGO

Índice

2 impresoras PioNext + 23 resinas agrupadas por indicación clínica.

HARDWARE · 2 IMPRESORAS 3D Impresoras PioNext PioNext Mini (chairside · 10 min corona) · PioNext Ultra (laboratorio · batch 30+)	PÁGINAS 03—05
CATEGORÍA 01 · 4 RESINAS Restauradoras Definitivas Coronas · Puentes · Cerámica · Restauración temporal · Lavable al agua	PÁGINAS 06—10
CATEGORÍA 02 · 3 RESINAS Prótesis Removable Base de dentadura rígida y flexible · Try-in de prueba estética	PÁGINAS 11—14
CATEGORÍA 03 · 5 RESINAS Modelos Dentales Ortodoncia · Ortho Model 2.0 · Troquel removable · Gingival (rígida y flexible)	PÁGINAS 15—20
CATEGORÍA 04 · 1 RESINA Ortodoncia Invisible Resina para alineadores transparentes fotopolimerizables · impresión directa 3D	PÁGINAS 21—22
CATEGORÍA 05 · 5 RESINAS Férulas · Guías · Colado Férulas flex y rígida · Guía quirúrgica standard y pro · Colado dental	PÁGINAS 23—28
CATEGORÍA 06 · SERIE PREMIUM · 5 REFERENCIAS Serie Key & RapidCeram RapidCeram · KeySplint (Soft/Hard) · KeyCast · KeyMask · KeyGuide	PÁGINAS 29—34

♦ EL ECOSISTEMA · 2 IMPRESORAS

Impresoras 3D PioNext

Dos máquinas, un ecosistema. **Elige según tu volumen de trabajo:** chairside para la clínica, batch XL para el laboratorio.

✓ SISTEMA

Abierto · resinas libres

✓ 18 PERFILES

PioCreat precargados

✓ OFERTA

Mini 3.390 € · Ultra 4.390 €

CHAIRSIDE · CLÍNICA

PioNext Mini

COMPACTA · POTENTE · IMPRIMIR + CURAR

**10 min**CORONA IMPRESA
Chairside 1 visita**1 €** / coronaCOSTE MATERIAL
El más bajo del mercado

♦ PERFIL IDEAL

Clínica que quiere entregar la corona en la misma visita.

Impresión + curado en un solo equipo · 20×17×24 cm sobremesa

LABORATORIO · BATCH XL

PioNext Ultra

XL · BATCH MASIVO · CARTUCHO 1 KG

**30+** / tiradaCORONAS BATCH
Producción industrial**50 µm** XYPRECISIÓN
Detalle marginal fino

♦ PERFIL IDEAL

Laboratorio con >20 piezas/día que quiere dejar de subcontratar.

Full arch · batch masivo · cartucho externo cambia sin manchar

VS

♦ UNA PREGUNTA, UNA RESPUESTA

¿En tu clínica se atiende al paciente o se produce en batch?

SE ATIENDE AL PACIENTE →

PioNext Mini

Chairside · 10 min · sobremesa · print+cure

SE PRODUCE EN BATCH →

PioNext Ultra

Laboratorio · 30+ piezas · cartucho 1 kg · full arch

 OFERTA LANZAMIENTO 2026

IMPRESORA CHAIRSIDE · TODO EN UNO

PioNext Mini

Compacta · Potente · Abierta. La solución impresión 3D **todo-en-uno** (imprime + cura) para tu clínica dental.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

Chairside en 10 min

10 min

TIEMPO IMPRESIÓN
Corona típica

1 €

COSTE POR CORONA
El más bajo del mercado

cm

MEDIDAS

Peso 5 kg · sobremesa

Abierta

SISTEMA DE RESINA
Bandeja · multi-marca

VENTAJAS CLAVE

resinas abiertas

fotocurado integrado

software gratuito

alta precisión

todas las indicaciones

SOFTWARE INCLUIDO

Slicer compatible con Windows/macOS.
Perfiles precargados para

APLICACIONES CLÍNICAS

Coronas · Puentes · Alineadores · Modelos · Guías quirúrgicas · Provisionales

OFERTA LANZAMIENTO · + IVA

PVP oficial 4.490 € + IVA

3.390 €

AHORRA 1.100 € · Break even < 6 meses en clínica media

RESERVAR OFERTA

SOLICITAR DEMO

REGALO INCLUIDO

Resina Definitiva
300 casos

EL CÁLCULO REAL

La chairside **más barata** con calidad clínica. **Corona a 1 €** vs. 6,6 € del competidor. Amortiza sola.

CE

FDA

ISO 13485

2 AÑOS GARANTÍA

SOPORTE ESPAÑA

 OFERTA LANZAMIENTO 2026

IMPRESORA LABORATORIO · ALTA PRODUCCIÓN

PioNext Ultra

Formato XL para laboratorios que producen **decenas de piezas al día**. Batch industrial de coronas, alineadores y modelos.



CARACTERÍSTICAS CLAVE

30+
CORONAS POR BATCH
En una sola tirada

Full arch
ÁREA DE IMPRESIÓN
Guías completas

50 µm
PRECISIÓN XY
Detalle marginal fino

Abierta
SISTEMA DE RESINA
Cartucho 1 kg externo

VENTAJAS CLAVE

- alta producción
- resinas abiertas
- cartucho externo 1 kg
- carcasa industrial
- full arch en 1 pieza

SOFTWARE INCLUIDO

Slicer gratuito con
Compatible con las 18 resinas PioCreat sin licencia.

APLICACIONES LABORATORIO

Modelos en batch · Alineadores directos · Guías full-arch · Coronas cerámicas · Colado

OFERTA LANZAMIENTO · + IVA

PVP oficial 5.490 € + IVA

4.390 €

AHORRA 1.100 € · Financiación 36-60 m disponible

RESERVAR OFERTA

SOLICITAR DEMO

 REGALO INCLUIDO

Resina Definitiva
300 casos

 EL CÁLCULO REAL

Si ya subcontratas **>20 piezas/día**, la Ultra amortiza en meses. Cartucho externo 1 kg = menos paradas para rellenar.

CE

FDA

ISO 13485

2 AÑOS GARANTÍA

SOPORTE ESPAÑA

CATEGORÍA 01 · 4 RESINAS

Restauradoras Definitivas

Coronas · Puentes · Incrustaciones · Onlays · Carillas · Provisionales

Dureza 85-95 Shore D · Resistencia flexural hasta 7.000 MPa · Alta translucidez



Coronas y Puentes
PÁG. 07



Cerámica Coronas
PÁG. 08



Restauración Temporal
PÁG. 09



Lavable al Agua
PÁG. 10

¿QUÉ HACE ESPECIAL A UNA RESINA RESTAURADORA?

La combinación de dureza + estética + biocompatibilidad.

DUREZA

92-94 Shore D en la resina de Coronas y Puentes: aguanta la carga masticatoria diaria sin fractura.

ESTÉTICA

Colores VITA A1-A3, B1 y BL1 White. Cubre el 90% de los casos clínicos habituales.

BIOCOMPATIBILIDAD

ISO 10993 e ISO 13485. Baja irritación cutánea, hipoalergénica para la piel.

Resina para Coronas y Puentes

Fotopolímero de alta dureza para prótesis definitivas: coronas, puentes, incrustaciones, onlays y carillas en laboratorios dentales.



PROPIEDADES POST-CURADO

Ficha técnica

92-94 DUREZA · SHORE D ASTM D 2240	2.500-3.500 MPa MÓDULO FLEXURAL ASTM D 790
140-160 MPa RESIST. FLEXURAL ASTM D 790	100-110 °C TEMP. DEFLEXIÓN ASTM D648 @66PSI

CARACTERÍSTICAS

- alta dureza
- baja contracción
- resistente al impacto
- hipoalergénica
- resistente a la temperatura

FICHA COMERCIAL

Color: A1 · A2 · A3 · B1 · BL1 White
Formato: 500 g / 1000 g · Compatible DLP/LCD 385-405 nm

APLICACIONES

Dentaduras · Puentes · Coronas · Incrustaciones · Carillas

PRECIO 1 kg · + IVA

903 €

Botella 1 kg · Formato 500 g disp.

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

Es la **resina caballo de batalla** del laboratorio: cubre el 90% de la restauradora diaria con un solo bote. Alta dureza y baja contracción para **fit clínico sin retoques**, y biocompatibilidad ISO 10993 para trabajar tranquilo.

RESTAURADORAS · FICHA 02

Resina **Cerámica** para Coronas

Fotopolímero de altísima resistencia flexural para unidades temporales y permanentes: coronas, inlays, onlays, carillas, puentes y dientes para prótesis dental.



PROPIEDADES POST-CURADO

Máxima resistencia

93-95DUREZA · SHORE D
ASTM D 2240**6.000-7.000**

MPa

MÓDULO FLEXURAL
ASTM D 790**110-140** MPaRESIST. FLEXURAL
ASTM D 790**100-110** °CTEMP. DEFLEXIÓN
ASTM D648 @66PSI

CARACTERÍSTICAS

alta dureza

baja contracción

hipoalergénica

resistente al impacto

excelente detalle

FICHA COMERCIAL

Color: **A1 · A2 · A3 · B1 · BL1 Blanco**Formato: **500 g / 1000 g** · Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

APLICACIONES

Coronas · Inlays · Onlays · Carillas · Puentes**PRECIO 500 g · + IVA****1.002 €**

Botella 500 g · 51% carga cerámica

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

La versión **Premium** de la Coronas y Puentes: hasta **7.000 MPa de módulo flexural** (doble del estándar) para restauraciones definitivas cerámicas de larga vida. **Excelente detalle** en marginal y anatomía oclusal.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

RESTAURADORAS · FICHA 03

Resina para Restauración Provisional

Fotopolímero para coronas y puentes provisionales, modelos de prueba y restauraciones dentales de aplicación temporal en clínica y laboratorio. También llamada resina temporal o de provisionales.



PROPIEDADES POST-CURADO

Provisional confiable

85-90DUREZA · SHORE D
ASTM D 2240**2.000-3.000**

MPa

MÓDULO FLEXURAL
ASTM D 790**100-140** MPaRESIST. FLEXURAL
ASTM D 790**< 1.5** %ABSORCIÓN DE AGUA
ASTM D570

BENEFICIOS CLAVE

baja irritación

baja alergenicidad

baja contracción

resistente a temperatura

alta dureza

FICHA COMERCIAL

Color: **A2 White**Formato: **500 g / 1000 g** · Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

APLICACIONES

Coronas y puentes provisionales · Modelos de prueba ·
Provisionales sobre implantes

PRECIO 1 kg · + IVA

185 €

Botella 1 kg · Formato 500 g disp.

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

Es **tu resina de puente** mientras el laboratorio termina la definitiva. Estética A2 natural, aguanta semanas en boca sin decolorar y ofrece **ajuste marginal preciso** gracias a su baja contracción durante el post-curado.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

RESTAURADORAS · FICHA 04

Resina Dental Lavable al Agua

Fotopolímero fácil de limpiar sólo con agua (sin alcohol isopropílico): restauraciones dentales, correcciones termoformables invisibles y otras aplicaciones dentales.



PROPIEDADES POST-CURADO

Sin alcohol isopropílico

85-90 DUREZA · SHORE D ASTM D 2240	1.000-1.500 MPa MÓDULO DE FLEXIÓN ASTM D 790
60-75 MPa RESIST. A LA FLEXIÓN ASTM D 790	75-80 °C TEMP. DEFLEXIÓN ASTM D648 @66PSI

- CARACTERÍSTICAS
- lavable al agua
 - baja irritación
 - hipoalergénica
 - baja contracción
 - alta dureza

FICHA COMERCIAL

Color: **Piel de trigo oscuro**

Formato: **500 g / 1000 g** · Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

APLICACIONES

Restauración dental · Correcciones invisibles · Termoformables

PRECIO 1 kg · + IVA

181 €

Botella 1 kg · Formato 500 g disp.

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

Se limpia **sólo con agua del grifo**: eliminas la compra recurrente de alcohol isopropílico, ahorras ventilación forzada y reduces el residuo peligroso del laboratorio. **Un producto verde que sale más barato al año.**

CATEGORÍA 02 · 3 RESINAS

Prótesis Removable

Bases de dentadura · Prótesis parciales · Modelos try-in

De la base rígida (85-90 Shore D) a la resina flexible con 32 MPa de tracción



Base de Dentadura
PÁG. 12 · Rígida biocompatible



Flexible Base Dentadura
PÁG. 13 · Con memoria elástica



Try-in Resin
PÁG. 14 · Prueba estética

¿RÍGIDA O FLEXIBLE? EL CASO CLÍNICO MANDA.

Dos filosofías protésicas, un mismo estándar de biocompatibilidad.

RÍGIDA · CONVENCIONAL

Dureza 85-90 Shore D, módulo flexural 3.000-4.000 MPa. Se comporta como un PMMA tradicional:


FLEXIBLE · MODERNA

Elongación 80%, alta resistencia al impacto. Para pacientes con o hipersensibilidad al metal.

PRÓTESIS · FICHA 01

Resina para Base de Dentadura

Fotopolímero rígido biocompatible para fabricación de aparatología dental: dentaduras completas y parciales removibles, bases, dientes, puentes, coronas, incrustaciones, onlays y carillas en laboratorios dentales.

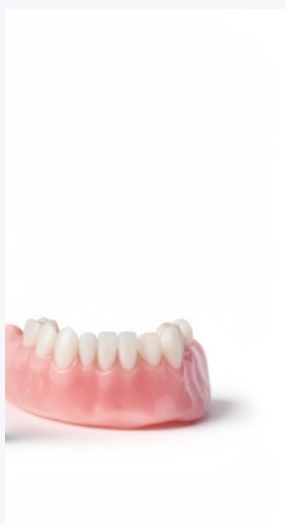

RESINA · CASO REAL IMPRESO

PROPIEDADES POST-CURADO

Base rígida biocompat.

85-90

DUREZA · SHORE D
ASTM D 2240

3.000-4.000

MPa
MÓDULO FLEXURAL
ASTM D 790

130-150 MPa

RESIST. FLEXURAL
ASTM D 790

< 1.0 %

ABSORCIÓN DE AGUA
ASTM D570

CARACTERÍSTICAS

biocompatible

hipoalergénica

baja contracción

alta durabilidad

absorción < 1%

FICHA COMERCIAL

Color: Rojo

Formato: 500 g / 1000 g · Compatible DLP/LCD 385-405 nm

IDEAL PARA

Dentaduras completas y parciales · Bases · Puentes · Coronas

PRECIO 1 kg · + IVA

895 €

Botella 1 kg · Formato 500 g disp.

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

Es la **alternativa PMMA impresa** a las bases termocuradas: mismo comportamiento clínico, absorción de agua < 1% (evita hinchazón a largo plazo) y un flujo digital que **reduce a la mitad** el tiempo de fabricación de una completa.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

PRÓTESIS · FICHA 02

Resina Flexible para Base de Dentadura

Fotopolímero elástico para modelos de dentadura, prótesis parciales flexibles, máscaras gingivales para implantes y prótesis de tejidos blandos.



PROPIEDADES POST-CURADO

90DUREZA · SHORE D
ASTM D 2240**80 %**ELONGACIÓN A ROTURA
ASTM D 638**32 MPa**RESIST. TENSIL
ASTM D 638**180 J/m**RESIST. IMPACTO IZOD
ASTM D 256

BENEFICIOS CLAVE

baja irritación

hipoalergénica

bajo encogimiento

alta elongación

alta resist. impacto

APLICACIONES

Dentaduras parciales flexibles · Máscara gingival · Prótesis tejidos blandos

PRECIO 1 kg · + IVA

699 €

Botella 1 kg · Formato 500 g disp.

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

Es la resina de la **retención imposible**: 80% de elongación a rotura significa que puedes diseñar clasps y retenciones sublinguales que **NO se romperán al insertar/retirar** mil veces. Y su color rosa gingival la hace estéticamente aceptable de fábrica.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

PRÓTESIS · FICHA 03

Resina Try-in

Fotopolímero para producción en masa de modelos de dentadura, modelos try-in de prueba estética y toda clase de aplicaciones dentales y médicas.



PROPIEDADES POST-CURADO

Prueba estética

85-90

DUREZA · SHORE D

ASTM D 2240

1.800-2.500

MPa

MÓDULO FLEXURAL

ASTM D 790

80-100 MPa

RESIST. FLEXURAL

ASTM D 790

< 1.5 %

ABSORCIÓN DE AGUA

ASTM D570

BENEFICIOS CLAVE

baja irritación

baja alergenidad

baja contracción

resist. temperatura

alta dureza

FICHA COMERCIAL

Color: A2 · Formato: 500 g y 1 kg

Compatible:  

APLICACIONES

Modelo de dentadura · Modelo Try-in · Investigación de implantes · Aplicación médica

PRECIO 1 kg · + IVA

147 €

Botella 1 kg · Formato 500 g disp.

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

Para enseñar al paciente cómo va a quedar la prótesis definitiva antes de fabricarla. Ajuste exacto (contracción < 1.5%) y color A2 natural: si aprueba el try-in, aprueba la definitiva. **Cero devoluciones estéticas.**

CATEGORÍA 03 · 5 RESINAS

Modelos Dentales

Modelos ortodoncia · Ortho Model 2.0 · Troquel removible · Gingival rígida y flexible

La base sobre la que se construye todo lo demás: precisión dimensional, alta durabilidad y color de trabajo



Modelo Orto
PÁG. 16



Ortho Model 2.0
PÁG. 17



Troquel Removible
PÁG. 18



Gingival
PÁG. 19



Gingiva Resin
PÁG. 20

EL MODELO ES EL CIMIENTO DEL FLUJO DIGITAL

Si el modelo falla en precisión, todo lo que va encima falla también.

PRECISIÓN

Baja contracción y estabilidad dimensional para que la corona/férula ajuste al primer intento.

DURABILIDAD

Dureza 85-90 Shore D: aguanta pruebas repetidas y almacenamiento largo sin deformarse.

COLOR DE TRABAJO

Colores mate (amarillo, piel trigo) que reducen reflejo del escáner y facilitan la vista.

MODELOS · FICHA 01

Resina para Modelo Orto

Fotopolímero para producción en masa de brackets invisibles, modelos de prueba, restauraciones dentales y toda clase de aplicaciones dentales y médicas.



PROPIEDADES POST-CURADO

Modelo confiable

85-90

DUREZA · SHORE D
ASTM D 2240

1.400-1.800

MPa
MÓDULO FLEXURAL
ASTM D 790

70-90 MPa

RESIST. FLEXURAL
ASTM D 790

75-85 °C

TEMP. DEFLEXIÓN
ASTM D648 @66PSI

CARACTERÍSTICAS

baja irritación

baja alergenicidad

baja contracción

resist. temperatura

alta dureza

FICHA COMERCIAL

Color: **Amarillo** · Formato: **500 g / 1000 g**
Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

AMPLIAS APLICACIONES

Modelos de brackets invisibles · Modelos de prueba ·
Restauraciones dentales

PRECIO

Consultar

info@aldrascan.com · +34 676 21 65 38

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

Es el **caballo de batalla del laboratorio de ortodoncia**: color amarillo mate que reduce reflejo al termoformar alineadores, dureza suficiente para modelo de trabajo repetido, y **coste por modelo mínimo** en presentación 1 kg.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

MODELOS · FICHA 02

Ortho Model 2.0

Fotopolímero de nueva generación para producción en masa de modelos de brackets invisibles, modelos de prueba, restauraciones dentales y aplicaciones dentales y médicas.



PROPIEDADES POST-CURADO

Versión avanzada

85-90

DUREZA · SHORE D
ASTM D 2240

1.200-1.600

MPa
MÓD. DE FLEXIÓN
ASTM D 790

80-95 MPa

RESIST. A LA FLEXIÓN
ASTM D 790

75-85 °C

TEMP. DEFLEXIÓN
ASTM D648 @66PSI

CARACTERÍSTICAS

baja irritación

baja alergenicidad

baja contracción

resist. temperatura

alta dureza

FICHA COMERCIAL

Color: **Amarillo parduzco** · 500 g / 1000 g
Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

APLICACIONES

Brackets invisibles · Modelo de prueba · Restauración dental

PRECIO 1 kg · + IVA

67 €

Botella 1 kg · Formato 500 g disp.

¿QUÉ CAMBIA VS. LA MODELO ORTO?

Es la **versión 2.0**: color amarillo parduzco menos saturado (más agradable a la vista del técnico), curva de curado más rápida y **mejor superficie mate** para termoformado invisible. Sustituye a la anterior en instalaciones de alto volumen.

MODELOS · FICHA 03

Modelos de Troquel Removable

Fotopolímero para producción en masa de restauraciones dentales, modelos de prueba, brackets invisibles y toda clase de aplicaciones dentales y médicas.



PROPIEDADES POST-CURADO

Modelo con troquel

85-90

DUREZA · SHORE D
ASTM D 2240

1.500-2.000

MPa
MÓDULO FLEXURAL
ASTM D 790

60-80 MPa

RESIST. FLEXURAL
ASTM D 790

75-85 °C

TEMP. DEFLEXIÓN
ASTM D648 @66PSI

CARACTERÍSTICAS

- baja irritación
- hipoalergénica
- baja contracción
- resist. temperatura
- alta dureza

FICHA COMERCIAL

Color: **Compleción de trigo** · Ref. RC-1B
Formato: 500 g / 1000 g · DLP/LCD 385-405 nm

AMPLIA APLICACIÓN

Restauración dental · Brackets invisibles · Modelo de prueba
· Aplicaciones médicas

PRECIO

Consultar

info@aldrascan.com · +34 676 21 65 38

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

Es la resina de **modelo maestro** con troqueles removibles: permite **retirar cada muñón** para inspeccionar marginal en corona/puente sin destruir el modelo. Estabilidad dimensional para prótesis fija de alta precisión.

MODELOS · FICHA 04

Resina Gingival

Fotopolímero elástico rojo gingival para producción en masa de modelos de dentaduras, modelos de implantes, restauraciones dentales y aplicaciones médicas.



PROPIEDADES POST-CURADO

Encía flexible

30-50

DUREZA · SHORE A
ASTM D 2240

300-400 %

ELONGACIÓN
ASTM D 412

8-15 MPa

RESIST. TRACCIÓN
ASTM D 412

12-18 kN/m

RESIST. DESGARRO
ASTM D 624

BENEFICIOS CLAVE

baja irritación

bajo potencial alergénico

baja contracción

tacto gingival realista

FICHA COMERCIAL

Color: Rojo gingival · Formato 500 g / 1000 g
Compatible DLP/LCD 385-405 nm

IDEAL PARA DIVERSAS APLICACIONES

Modelos de dentaduras · Restauraciones dentales · Modelos de implantes · Aplicaciones médicas

PRECIO

Consultar

info@aldrascan.com · +34 676 21 65 38

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

La resina que hace que **los modelos con implantes se sientan reales**: dureza 30-50 Shore A (como la encía), elongación 300-400% y color rojo gingival. **Insustituible para prótesis fija sobre implantes** y planificación estética con encía visible.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

MODELOS · FICHA 05

Gingiva Resin

Fotopolímero elástico para producción en masa de modelos de dentaduras, restauración dental y aplicaciones dentales y médicas.



PROPIEDADES POST-CURADO

Encía protésica

30-50

DUREZA · SHORE A
ASTM D 2240

300-400 %

ELONGACIÓN A ROTURA
ASTM D 412

8-15 MPa

RESIST. TRACCIÓN
ASTM D 412

12-18 kN/m

RESIST. AL DESGARRO
ASTM D 624

BENEFICIOS CLAVE

baja irritación en la piel

bajo riesgo alergénico

baja contracción

tacto elastómero

FICHA COMERCIAL

Color: **Gingival red** · Ref. PN-GR

Formato: 500 g / 1000 g · DLP/LCD 385-405 nm

IDEAL PARA DIVERSAS APLICACIONES

Modelos de dentaduras · Restauraciones dentales · Modelos de implantes · Aplicaciones médicas

PRECIO

Consultar

info@aldrascan.com · +34 676 21 65 38

¿PARA QUÉ SIRVE ESTA RESINA?

Simula la **encía protésica** con dureza 30-50 Shore A y elongación 300-400%: modelos con impresión de implantes que **se sienten como boca real**. Imprescindible para prótesis fija sobre implantes y planificación estética con encía visible.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

CATEGORÍA 04 · 1 RESINA

Ortodoncia Invisible

Impresión directa de alineadores invisibles fotopolimerizables

Alta transparencia · Alta elongación · Alta resistencia al impacto

FLUJO DIRECTO 3D
Sin termoformado

EL SALTO TECNOLÓGICO DE LA ORTODONCIA INVISIBLE

De termoformar sobre modelo, a imprimir el alineador directo.

01

Escaneo digital

IOS captura la arcada. STL directo al CAD de ortodoncia.

02

Diseño CAD del alineador

Cada stage se diseña con el grosor exacto. Sin plantillas termoformadas.

03

Impresión DLP/LCD

El alineador sale terminado de la impresora. Sin modelo, sin blister, sin pulir.

RESULTADO EN LABORATORIO

Reduces **2 pasos completos** (modelo + termoformado), eliminas material PET/PU y bajas el coste unitario por alineador.

ORTODONCIA · FICHA 01

Resina para Alineadores Transparentes

Fotopolímero rígido de alta transparencia para la fabricación directa de alineadores invisibles, dispositivos ortodónticos, modelos dentales y aplicaciones restaurativas.



PROPIEDADES POST-CURADO

Cristal invisible

78-82DUREZA · SHORE D
ASTM D 2240**1.200-1.400**MPa
MÓDULO FLEXURAL
ASTM D 790**100-120 %**ELONGACIÓN A ROTURA
ASTM D 638**200-250 J/m**RESIST. IMPACTO IZOD
ASTM D 256

CARACTERÍSTICAS

alta transparencia

baja irritación

hipoalergénica

baja contracción

alta elongación

alta resist. impacto

FICHA COMERCIAL

Color: **Transparente** · Formato: **500 g / 1000 g**Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

APLICACIONES

Alineadores invisibles · Dispositivos ortodónticos · Modelos dentales**PRECIO 1 kg · + IVA****538 €**

Botella 1 kg · Formato 500 g disp.

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

Imprimes el **alineador terminado** — sin modelo, sin termoformado, sin blíster. Transparencia óptica que hace invisible el aparato en boca, y elongación 100-120% para **colocar y retirar cientos de veces** sin fatigar el material.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

CATEGORÍA 05 · 5 RESINAS

Férulas · Guías · Colado

Aplicaciones especiales de laboratorio: rígidas, flexibles, quirúrgicas y de colado

Esterilizables a 135°C · Bajo residuo de ceniza · Alta transparencia



Flex Splint
PÁG. 24



Rígida Splint
PÁG. 25



Surgical Guide
PÁG. 26



Guía Q. Pro
PÁG. 27



Colado Dental
PÁG. 28

CINCO ESPECIALIDADES, UNA MISMA EXIGENCIA CLÍNICA

Quando el error no se puede corregir en boca.

FÉRULAS

Rígida para retención de largo plazo,
Flex para protección nocturna,
ambas

GUÍAS QUIRÚRGICAS

Transparencia clínica y estabilidad
dimensional para

COLADO DENTAL

Fotopolímero de
para fundir coronas Cr-Co /
oro sin restos.

FÉRULAS · FICHA 01

Resina Flex para Férulas

Fotopolímero flexible para férulas de descarga nocturna y aplicaciones médicas. Resiste esterilización a 135°C sin agrietarse ni deformarse.



PROPIEDADES POST-CURADO

Esterilizable 135°C

75-80

DUREZA · SHORE D
ASTM D 2240

1.000-1.200

MPa
MÓDULO FLEXURAL
ASTM D 790

120-150 %

ELONG. A ROTURA
ASTM D 638

180-250 J/m

RESIST. IMPACTO IZOD
ASTM D 256

BENEFICIOS CLAVE

baja irritación

baja alergenicidad

alta transparencia

alta elongación

esterilizable 135°C

FICHA COMERCIAL

Color: **Transparente** · Formato: 500 g / 1000 g
Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

APLICACIONES

Férulas nocturnas · Férulas oclusales · Aplicaciones médicas

PRECIO 1 kg · + IVA

399 €

Botella 1 kg · Formato 500 g disp.

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

La única resina de férula flexible que **resiste esterilización en autoclave a 135°C** sin agrietarse ni deformarse. Elongación 120-150% para bruxismo severo: absorbe el impacto oclusal sin fracturar como un PMMA rígido.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

FÉRULAS · FICHA 02

Resina Rígida para Férulas

Fotopolímero rígido para retenedores permanentes, férulas de posicionamiento y aplicaciones médicas de largo plazo.



PROPIEDADES POST-CURADO

Retención estable

78-82

DUREZA · SHORE D
ASTM D 2240

1.400-1.600

MPa
MÓDULO FLEXURAL
ASTM D 790

>40 MPa

RESIST. FLEXURAL
ASTM D 790

110-120 %

ELONGACIÓN A ROTURA
ASTM D 638

CARACTERÍSTICAS

- baja irritación
- baja alergenicidad
- baja contracción
- alta transparencia
- alta elongación
- alta resist. impacto

FICHA COMERCIAL

Color: **Transparente** · Formato: **500 g / 1000 g**
Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

APLICACIONES

Retenedores permanentes · Férulas de posicionamiento · Splints rígidos · Aplicaciones médicas

PRECIO 1 kg · + IVA

399 €

Botella 1 kg · Formato 500 g disp.

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

Cuando la Flex se queda corta: dureza 78-82 Shore D para **retención de largo plazo** tras ortodoncia. Cristal ópticamente claro (no amarillea al año), **esterilizable a 135°C** y fórmula biocompatible validada por profesionales.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

GUÍAS · FICHA 03

Resina para Guía Quirúrgica

Fotopolímero para fijaciones de cirugía de implantes dentales y aplicaciones médicas. Transparencia clínica para verificación intraoperatoria.



PROPIEDADES POST-CURADO

Precisión angular

75-85DUREZA · SHORE D
ASTM D 2240**2.500-3.500** MPaMÓDULO FLEXURAL
ASTM D 790**100-120** MPaRESIST. FLEXURAL
ASTM D 790**60-70** °CTEMP. DEFLEXIÓN
ASTM D648 @66PSI

CARACTERÍSTICAS

baja irritación

baja alergenicidad

baja contracción

alta transparencia

alta flexibilidad

FICHA COMERCIAL

Color: **Transparente** · Formato: **500 g / 1000 g**Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

APLICACIONES

Cirugía de implante dental · Fijación de guía quirúrgica ·
Aplicaciones médicas

PRECIO

Consultar

info@aldrascan.com · +34 676 21 65 38

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

Cuando el error **no se puede corregir en boca**: transparencia total para verificar posición de emergencia intraoperatoriamente, y baja contracción para **precisión angular $\pm 1^\circ$** en la trayectoria del implante.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

GUÍAS · FICHA 04

Guía Quirúrgica Resina Pro

Fotopolímero premium para férulas quirúrgicas dentales, ortopédicas y aplicaciones médicas. Resiste esterilización a 135°C sin agrietarse ni deformarse.



PROPIEDADES POST-CURADO

Nivel Pro · autoclave

75-80

DUREZA · SHORE D
ASTM D 2240

1.000-1.200

MPa
MÓDULO FLEXURAL
ASTM D 790

110-140 %

ELONGACIÓN A ROTURA
ASTM D 638

240-300 J/m

RESIST. IMPACTO IZOD
ASTM D 256

BENEFICIOS CLAVE

baja irritación

baja alergenicidad

alta transparencia

esterilizable 135°C

alta resist. impacto

FICHA COMERCIAL

Color: **Beige transparente** · Formato **500 g / 1000 g**
Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

IDEAL PARA

Guías Quirúrgicas · Cirugía de Implantes · Aplicaciones Ortodónticas ·
Aplicaciones Médicas

PRECIO

Consultar

info@aldrascan.com · +34 676 21 65 38

¿QUÉ CAMBIA VS. LA SURGICAL GUIDE STANDARD?

La versión **Pro** soporta **autoclave 135°C** repetidamente (imprescindible en clínica implantológica), tiene mayor elongación (110-140%) para desmoldar guías con retención posterior, y resistencia al impacto 240-300 J/m para **guías largas full-arch** sin fractura.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

COLADO · FICHA 05

Resina para Colado Dental

Fotopolímero calcinable para producción en masa de coronas dentales coladas, estructura de dentaduras y aplicaciones de colado dental y médico.



PROPIEDADES CLAVE

Fotopolímero calcinable

Bajo

RESIDUO DE CENIZA
Sin restos en el metal

1.500-2.000

MPa
MÓDULO FLEXURAL
ASTM D 790

80-85

DUREZA · SHORE D
ASTM D 2240

850 °C

BAKEOUT (1.5 h)
Cocción calcinable completa

CARACTERÍSTICAS

bajo residuo de ceniza

baja contracción

alta dureza

segura y biocompatible

FICHA COMERCIAL

Color: **Rojo cereza (Cherry Red)**
Formato: **500 g / 1000 g · DLP/LCD 385-405 nm**

APLICACIÓN AMPLIA

Corona Dental · Base de Dentadura · Brackets Ortodoncia · Colado Médico

PRECIO

Consultar

info@aldrascan.com · +34 676 21 65 38

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

Reemplaza al **encerado manual** del laboratorio: imprimes la corona en resina, la fundes con Cr-Co u oro y no deja restos de ceniza que arruinen el marginal. Color rojo cereza que **contrasta con el revestimiento** para inspección visual antes de fundir.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

SERIE PREMIUM · 5 REFERENCIAS

Serie Key & RapidCeram

Cinco referencias premium para las **clínicas más exigentes**. Coronas cerámicas de alta velocidad, férulas Keystone certificadas y guías quirúrgicas de máxima transparencia.

P.30 · RESTAURADORAS PREMIUM

RapidCeram

Cerámica nanohíbrida Rodin®. Coronas **same-day** en 3 tonos (A1 · A2 · B1).

1.275 € / 0,6 kg

P.31 · FÉRULAS KEYSTONE

KeySplint

Familia Soft/Hard × Violet/Clear. La referencia mundial en férulas nocturnas.

817 € / 1 kg · 4 variantes

P.32 · COLADO

KeyCast

Calcinable violeta. Sin residuo de ceniza para coronas y esqueléticos.

403 € / 1 kg

P.33 · MÁSCARA GINGIVAL

KeyMask

Encía flexible rosa. Simula **tejido blando** en modelos con implantes.

307 € / 0,5 kg

P.34 · GUÍAS QUIRÚRGICAS

KeyGuide

Guía quirúrgica **transparente** rígida Class I biocompatible.



460 € / 1 kg

¿POR QUÉ ESTA SERIE?

Cuando la calidad no es negociable.

Resinas certificadas por los fabricantes más exigentes: **Rodin® / Pac-Dent** (RapidCeram) y **Keystone Industries** (Serie Key). Compatibles DLP/LCD 385-405 nm.

FABRICANTES OFICIALES

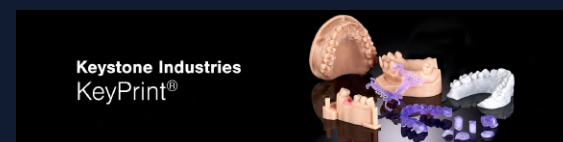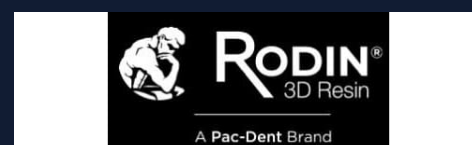

SERIE PREMIUM · FICHA 01

Rodin® RapidCeram

Cerámica nanohíbrida con **51% de carga cerámica** para restauraciones definitivas de coronas, puentes y carillas. Same-day dentistry a máxima velocidad. Disponible en 3 tonos: **A1 · A2 · B1**.



PROPIEDADES POST-CURADO

Same-day cerámica

≥95 DDUREZA · SHORE D
ASTM D 2240**114-130** MPaRESIST. FLEXURAL
ISO 20795-1**51** %CARGA CERÁMICA
Nanohíbrida Rodin®**2×**VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
vs. competidoras filled

3 TONOS DISPONIBLES

A1

A2

B1

FICHA COMERCIAL

Formato: **Botella 0,6 kg** · Fabricante: **Rodin® / Pac-Dent**
Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

APLICACIONES DEFINITIVAS

Coronas · Puentes · Carillas · Inlays · Onlays

PRECIO 0,6 kg · + IVA

1.275 €

Por tono (A1 · A2 · B1)

¿POR QUÉ ESTA RESINA?

Es la **referencia same-day** del mercado: imprime coronas en **menos de 15 min** con 51% de carga cerámica. Resistencia mecánica superior a la Coronas y Puentes estándar, indicada para **restauración definitiva** con estética de alta gama.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

SERIE PREMIUM · FICHA 02

Familia KeySplint

La referencia mundial en **férulas nocturnas** impresas 3D. Fabricada por **Keystone Industries**. Cuatro variantes para cubrir todos los diagnósticos.



MATRIZ CLÍNICA · 4 VARIANTES

FLEXIBLE · SUAVE

KeySplint Soft®

Bruxismo severo · Confort máximo · Uso prolongado

LIGHT VIOLET

SOFT · LIGHT VIOLET

817 €

Botella 1 kg

CLEAR

SOFT · CLEAR

817 €

Botella 1 kg

RÍGIDA · DURA

KeySplint Hard®

Retenedor fijo · Inmovilización · Posicionadores

HARD · LIGHT VIOLET

817 €

Botella 1 kg

HARD · CLEAR

817 €

Botella 1 kg

KEYSPLINT SOFT · TDS Keystone

Shore D: **80-85** · Flex. Strength: **44-47 MPa**
Elongación: **>110%** · IZOD: **45-48 J/m**

KEYSPLINT HARD · TDS Keystone

Flex. Strength: **100-110 MPa** · Flex. Mod.: **2.300-2.400 MPa**
Elongación: **9%** · Ideal retenedores rígidos

APLICACIONES

Férulas nocturnas · Retenedores · Posicionadores · Mouthguards

PRECIO 1 kg · + IVA

817 € c/u

¿POR QUÉ LA FAMILIA KEYSPLINT?

Es la **resina de férula más certificada** a nivel mundial. Estabilidad de color superior a 3 años, sin discromías. Elige **Soft** para pacientes con bruxismo severo o alto índice de aceptación, o **Hard** para retenedores permanentes e inmovilización.

SERIE PREMIUM · FICHA 03

KeyCast Violet

Resina calcinable violeta de Keystone Industries para **colado de precisión**. Sin residuo de ceniza. Reemplaza el encerado manual en coronas coladas, esqueléticos parciales y estructuras metálicas.



PROPIEDADES CLAVE

Burnout limpio

0%

RESIDUO CENIZA
Ash-free burnout

Baja

CONTRACCIÓN
Precisión dimensional

Cr · Au · Ag

METALES COMPAT.
Cromo · Oro · Plata

Rápido
+ Gradual

CICLOS BURNOUT
Ambos compatibles

CARACTERÍSTICAS

calcínable

sin porosidad

detalles finos

alta rigidez

superficie lisa

FICHA COMERCIAL

Color: **Violeta** · Formato **1 kg**

Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

APLICACIONES

Coronas coladas · Puentes · Esqueléticos parciales · Copings

PRECIO 1 kg · + IVA

403 €

Botella 1 kg · KeyCast Violet

¿POR QUÉ KEYCAST?

Sustituye el **encerado manual** del laboratorio: imprimes la estructura, la calcinas, cueles el metal. **Cero residuo de ceniza** = superficie interna perfecta del molde = ajuste marginal impecable en la corona final.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

SERIE PREMIUM · FICHA 04

KeyMask Pink

Máscara gingival **rosa flexible** de Keystone Industries. Simula el aspecto y tacto de la encía en modelos con implantes. Firme pero flexible: se corta, se pule y aguanta manipulación clínica sin deformar.



PROPIEDADES · TDS Keystone

Encía realista

2 MPaRESIST. TRACCIÓN
ASTM D 638**4,6 MPa**MÓDULO YOUNG
ASTM D 638**41 %**ELONGACIÓN A ROTURA
ASTM D 638**Rosa**COLOR NATURAL
Tono gingival

CARACTERÍSTICAS

flexible pero firme

se puede pulir

se puede cortar

tacto realista

no se deforma

FICHA COMERCIAL

Color: **Rosa gingival** · Formato **0,5 kg**
Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

APLICACIONES

Modelos con implantes · Presentaciones de caso · Try-in estético ·
Formación clínica

PRECIO 0,5 kg · + IVA

307 €

Botella 0,5 kg · KeyMask Pink

¿POR QUÉ KEYMASK?

Es la máscara gingival **que no se rompe** al manipular el modelo con implantes. Perfecta para **presentaciones al paciente**: el modelo se ve exactamente como se verá en boca, con encía rosa realista alrededor de los pilares.

CE

FDA

ISO 10993

ISO 13485

MSDS

REACH

RoHS

SERIE PREMIUM · FICHA 05

KeyGuide

Resina rígida **Class I biocompatible** de Keystone Industries para **guías quirúrgicas dentales**. Transparencia óptica para visualización durante la cirugía, rigidez sin deformación bajo las fuerzas del taladro guiado.



PROPIEDADES POST-CURADO

Rigidez guiada

Class I BIOCOMPATIBILIDAD ISO 10993 + MDR	Alta TRANSPARENCIA ÓPTICA Visualización cirugía
Alta RIGIDEZ FLEXURAL Sin deformación	134 °C ESTERILIZABLE Autoclave compatible

CARACTERÍSTICAS

- transparente
- rígida
- Class I MDR
- esterilizable
- alta precisión

FICHA COMERCIAL

Color: **Transparente** · Formato **1 kg**
Compatible **DLP/LCD 385-405 nm**

APLICACIONES

Guías quirúrgicas de implantes · Guías parciales · Guías full-arch

PRECIO 1 kg · + IVA

460 €

Botella 1 kg · KeyGuide

¿POR QUÉ KEYGUIDE?

Es la **guía quirúrgica de referencia** de Keystone Industries: **Class I MDR** para contacto oral con paciente, **autoclavable** a 134°C y **transparencia total** para verificar posición del implante durante la cirugía. Segura para casos implantológicos de alta responsabilidad.

- CE
- FDA
- ISO 10993
- ISO 13485
- CLASS I MDR
- USP CLASS VI
- AUToclave 134°C

♦ MATRIZ CLÍNICA DE DECISIÓN

¿Cuál resina uso hoy?

5 categorías clínicas · 18 resinas · 1 sola decisión. Encuentra tu resina en menos de 10 segundos.

CATEGORÍA 01

Restauradoras

4

RESINAS

85-95 D
SHORE D

★ MÁS VENDIDA

Coronas y Puentes

903 € / kg · 92-94 D

TAMBIÉN EN LA CATEGORÍA

Cerámica 51% · 1.002 €

Provisional · 185 €

Lavable agua · 181 €

CATEGORÍA 02

Prótesis

3

RESINAS

85-90 D
SHORE D

★ CABALLO DE BATALLA

Base de Dentadura

895 € / kg · 85-90 D

TAMBIÉN EN LA CATEGORÍA

Flexible Base · 699 €

Try-in · 147 €

CATEGORÍA 03

Modelos

5

RESINAS

30A - 90D
RANGO AMPLIO

★ ANZUELO ORTODONCIA

Ortho Model 2.0

67 € / kg · 85-90 D 🔥

TAMBIÉN EN LA CATEGORÍA

Ortho Model · Troquel Die

Gingival · Gingiva PN-GR

consultar precio

CATEGORÍA 04

Ortodoncia

1

RESINA

78-82 D
CRISTAL

★ IMPRESIÓN DIRECTA

Clear Aligner

538 € / kg · sin termoformar

CASOS DE USO

Alineadores invisibles

Dispositivos ortodónticos

Modelos dentales

CATEGORÍA 05

Férulas · Guías · Colado

5

RESINAS

FÉRULAS
Flex + Rígida
399 € c/u

GUÍAS
Std + Pro
consultar

COLADO
Calcinable
consultar

★ ARGUMENTO ESTRELLA — AUTOCLAVE 135 °C

Flex Splint · Rígida Splint · Guía Pro

Únicas en la gama esterilizables sin deformar

DECISIÓN CLÍNICA

Bruxismo severo → Flex 120-150% elongación · Retenedor permanente → Rígida 78-82 D

· Implantología → Guía Pro autoclave

♦ DECIDE EN 10 SEGUNDOS

¿Qué necesitas imprimir hoy?

CORONAS · PUENTES

→ Coronas y Puentes 903 €

→ Premium: Cerámica 51% 1.002 €

DENTADURAS

→ Base Dentadura 895 €

→ Retención: Flexible 699 €

FÉRULAS · GUÍAS

→ Bruxismo: Flex Splint 399 €

→ Retenedor: Rígida 399 €

CERTIFICACIONES · TRAZABILIDAD

Certificadas para clínica.

Cada resina de la gama PioCreat/PioNext pasa por 7 certificaciones internacionales del fabricante. Compra tranquilo, factura tranquilo. [Consulta la ficha MSDS específica por resina.](#)

CE

Mercado europeo

Conformidad UE para producto sanitario clase IIa.

FDA

US Food & Drug

Autorización de comercialización en EE.UU.

ISO 10993

Biocompatibilidad

Evaluación de dispositivos médicos en contacto con tejido.

ISO 13485

Sistema calidad

Gestión calidad para fabricantes de producto sanitario.

MSDS

Ficha de seguridad

Datos técnicos, manipulación segura, primeros auxilios, gestión de residuos.

REACH

Sustancias químicas UE

Reglamento europeo de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas.

RoHS

Sustancias peligrosas

Restricción de plomo, mercurio, cadmio y otras sustancias peligrosas.

POR QUÉ IMPORTA LA TRAZABILIDAD

Un producto sin ficha técnica es un producto sin defensa legal.

EN LA CLÍNICA

Si un paciente denuncia, tú necesitas con qué material se fabricó su prótesis. Las certificaciones oficiales del fabricante PioCreat son tu prueba legal.

EN EL LABORATORIO

Cada lote se entrega con MSDS y certificado ISO adjunto.



ODONTOLOGÍA DIGITAL · MADE IN SPAIN

Hablemos de tu próxima corona.

Muestras **gratis** el mismo día · Demo **en tu clínica** · Instalación en **30 días**.

+300
CLÍNICAS ACTIVAS

24 h
RESPUESTA COMERCIAL

100%
SOPORTE EN ESPAÑOL



CANAL DIRECTO · CIERRA HOY

+34 676 21 65 38

Lun-Vie 9:00-19:00 · Sáb 10:00-14:00 · WhatsApp 24 h

RESERVA 24/7



Escanea y agenda

EMAIL COMERCIAL

info@aldrascan.com

Presupuestos · muestras · técnica

WEB · CATÁLOGO ONLINE

aldrascan.com

Reserva · financiación · packs

WHATSAPP DIRECTO

+34 676 21 65 38

Respuesta < 2 h · 7 días/sem.



DISTRIBUIDOR OFICIAL

PioCreat / PioNext

en España

24 h

RESPUESTA COMERCIAL

Contestamos toda solicitud antes de 24 h.

Gratis

MUESTRAS + DEMO

3 formulaciones y visita en clínica sin coste.

36-60 m

FINANCIACIÓN

Leasing / renting con partners bancarios.